



# 取扱説明書補足版

mini(D937)

# お使用の前に

本製品はリチウムイオンが搭載されています。

注意事項をお守りいただき正しくお使いいただく事で、バッテリーの寿命が大幅に伸びます。

## リチウムイオン搭載製品の注意事項

- ① バッテリーが0%の状態では放置せず、定期的に充電し、残量30~50%をキープしてください。
- ② コードレスで電池を使い切った場合は再度充電してから保管してください。
- ③ アダプターをつけたまま長時間放置せず、過充電しないように注意してください。
- ④ 寒冷地や気温差の激しい場所での保管は避け、室温18-28℃で保管することでトラブルを防ぎます。

### ⚠ 注意

● バッテリーが0%の状態では放置し、久しぶりに使用する場合には、うまく作動しないことがあります。

#### ○ お試しいただきたい方法

本体にACアダプターがしっかり差し込んでいる事を確認し、1~2時間通電してから再度電源を入れ直してください。

● 使用時本体が熱くなる現象について  
連続使用等を多用した場合、本体が熱くなる場合がございます。

#### ○ お試しいただきたい方法

電源をオフにし、内部ファンの音が完全にしなくなったことを確認してから本体からACアダプタープラグを外し、本体の熱が冷めてから再度使用してください。

※コードレスと交流の使用は、交流の方が照射間隔が狭い(速い)ためスピーディーにお使い頂きたい場合は交流での使用を推奨します。

# 照射の際の注意

## ⚠️ 注意

### ● 肌を守るために

- ・照射の際は付属のサングラスの使用を推奨します。
- ・直接光を覗き込まない(目のやけどの恐れ)。
- ・サングラスで覆われる目の周りには使用しない。
- ・口の中・喉仏・乳首・乳輪、おへその内側に使用しない。
- ・性器、肛門、粘膜等を使用しない。
- ・ほくろ、あざ、入れ墨、タトゥーに照射しない。
- ・手術の跡などに使用しない。


### 使用できない箇所一覧

① 口の中、性器、粘膜等	⑧ 耳
② 整形手術、医療手術を行った部位	⑨ 乳首、乳輪
③ 喉仏	⑩ おへその内側
④ 眼球、まぶた、目のまわり	⑪ 大静脈
⑤ ニキビや吹き出物がある部位	⑫ 入れ墨、ポティー ペインティングを施した部位
⑥ あざ、ほくろがある部位	
⑦ 眉毛、頭髪	


注意: 上記の表はすべて網羅しているわけではありません。  
ご自身が本製品を使用できるかわからない場合、事前に専門医に確認してください。

### 〈禁止部位〉

■ 部に使用しない

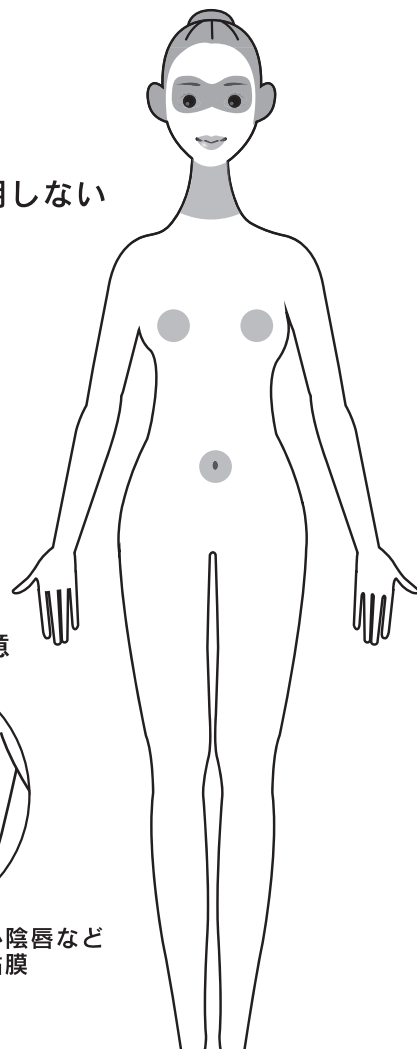

### VIO ケア時の注意

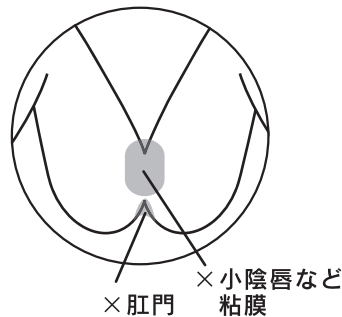

# 照射の際の注意




注意

## ●明るい場所でご使用ください


照射口およびフラッシュ自動調節システムが肌に触れている場合にのみ作動するよう、安全に設計されていますが暗い場所で使用する場合うまく作動しない場合がございます。

## 指のケア

照射口が隠れるよう肌を密着させ指は2本ずつ照射することをおすすめします。手の甲に反応しにくい場合、位置をずらすなどしなるべく照射口と肌を密着させます。

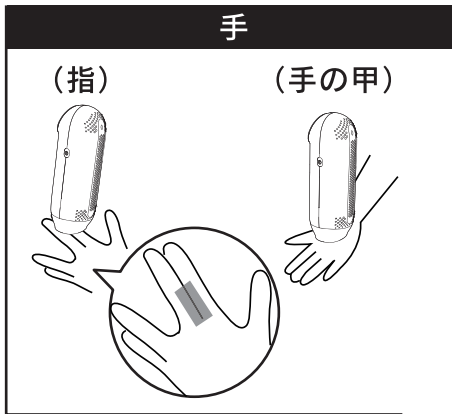


## 全身 24箇所まるごとケア

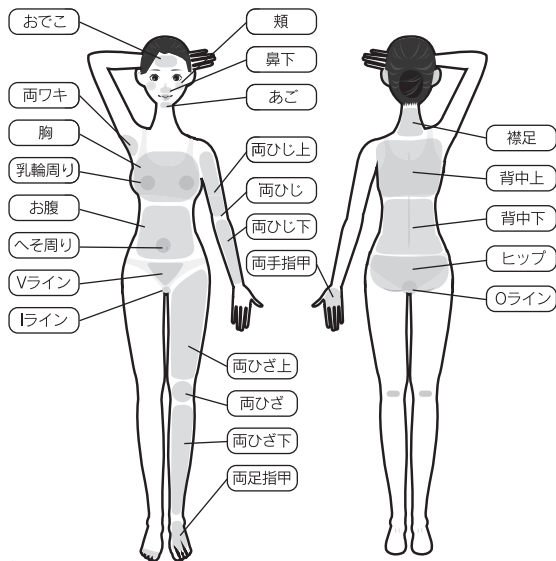

## 男性の方も ご使用いただけます


顔はメイクを落とした状態でご使用ください。  
化粧水やクリームをつけた状態で使用しないでください。

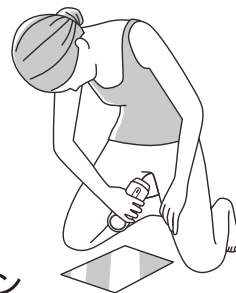


## Vゾーン



Vライン

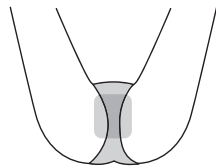

Iライン

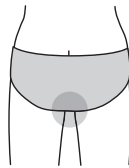


Oライン

## I・Oゾーン

- ・鏡を用意し、ケアしたい部位が見える姿勢でお使いください。
- ・無理に押し当てず肌センサーが反応する部位のみ使用してください。
- ・除毛ができていない部位のみにお使いください。
- ・粘膜等、適さない部位に照射しないように慎重に行ってください。

# モードの名称

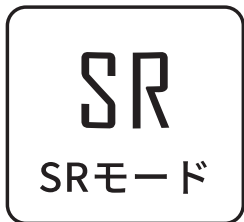

全身モード:全身にお使いいただけます。

顔モード:唇のまわりの細い毛に

お使いいただけます。

VIOモード:VIOゾーンに

お使いいただけます。

SRモード:光フェイシャル

としてお使いいただけます。



SRモード

## 使用間隔 ムダ毛ケアモード

時 間	1~4週目	5~8週目	8週目以降
使用頻度	3~4回/週	2~3回/週	1回/半月~1カ月

### SR モード

#### 使用頻度 2~3回 / 週

顔はメイクを落とした状態でご使用ください。  
化粧水やクリームをつけた状態で使用しないでください。

・全てのモードで、1日に同じ箇所には1回を限度に使用する  
(やけどや肌トラブルの原因)

ご自身が本製品を使用できるか分からない場合、事前に専門医に確認してください


お肌の状態に合わせてご使用ください。

照射後は化粧水で保湿しお肌をいたわり  
強い紫外線を避けるようにしてください。


ほくろ、あざ、吹き出物やニキビの箇所には使用しないでください。  
お肌に合わない場合は直ちに使用を止めてください。

しばらく使用しなかった場合は最終の1週目から同じペースで使用してください。

# 各部のなまえ

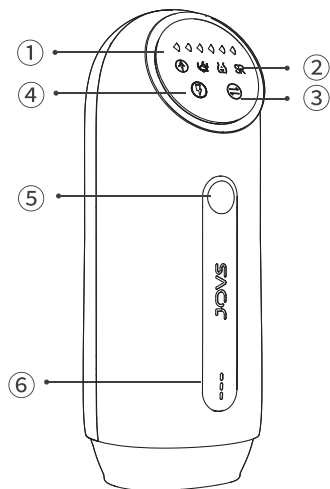

- ① 操作パネル:照射出力表示  
左から右順:1~6段階)
- ② 操作パネル:モード表示
- ③ 操作パネル:モード切り替え  
ボタン
- ④ 操作パネル:自動連続照射  
ボタン
- ⑤ 照射ボタン(2秒間長押しで  
自動照射モードに切替)
- ⑥ 電池残量表示(3メモリー)

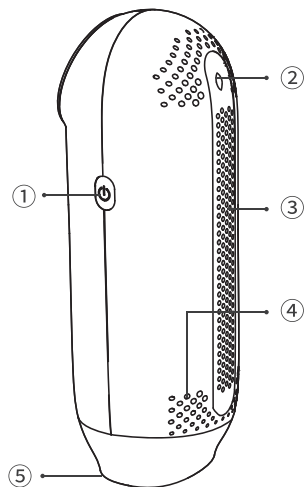

- ① 電源ボタン  
長押し2秒:電源ON/OFF  
短押し:照射出力調整  
(1~6段階)
- ② 電源差し込み口
- ③ 吸気口
- ④ 排気口
- ⑤ 照射口



シェーバー




サングラス



電源アダプター


# 使用のステップ

## STEP1

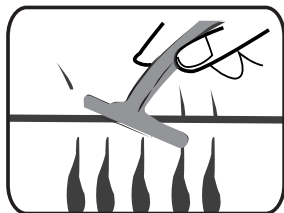


シェーバーなどで脱毛する部分のムダ毛を処理します。  
(照射前日に完了しているとよりお肌に優しいです。)

## STEP2

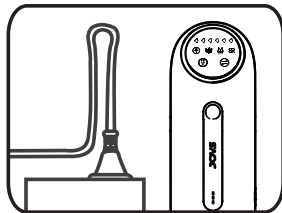


電源に接続すると機器両側のライトが点灯します。そのままでもご利用できますが、コードレスで使用する場合は、**約2時間で満充電**となります。  
ACアダプタを接続すると、充電が始まり電池残量表示が点滅します。

## STEP3

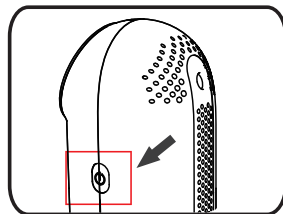

本体側面の電源ボタンを2秒間長押しし、電源を入れます。

## STEP4

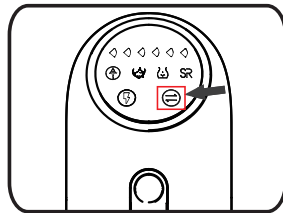


⊖ ボタンをタッチして、お好みのモードに切り替えられます。出力レベルの調整は電源ボタンを短押しします。1~6まで6段階の調整ができます。

## STEP5




保護メガネを装着してから、照射面を肌に密着させて照射ボタンを押します。  
※照射ボタンを2秒間長押し、またはタッチセンサーを押すと、連続照射モードに移行します。

## STEP6

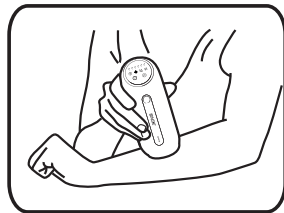


保照射部位に密着するように照射面を肌に当ててください。照射ボタンを押すと照射されます。密着していない場合、照射ボタンを押しても照射されません。

## STEP7

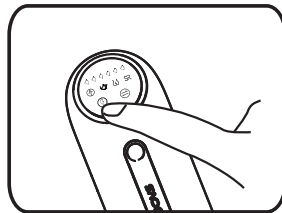

スクリーンにあるⓂをタッチすると、連続照射モードに切り替わります。脚、腕などの比較的広い部位は連続照射モードを使用するとラクです。

## STEP8

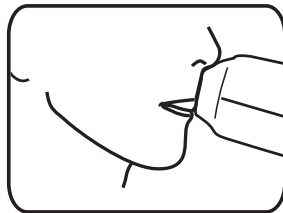

照射する部位によって、適切なモードに切り替えて使用します。  
◎男性のヒゲにもご利用いただけます。男性のヒゲは太い毛の場合、「VIOモード」を選択しお使いいただくと効果的です。

# 初期不良品の保証および対応について

初期不良品の場合、商品ご購入から起算して1年以内の保証期間である場合、対応いたします。

## 保証書

日本国内において保証をお受けになる際はこちらが必要になります。  
大切に保管をしてください。

品名	JOVS mini (D937)	製造番号	
お客様	ご住所・お名前・電話番号  保証書に記入されたお客様の個人情報は、製品の修理や交換等のみに使用いたします。このほかの用途で使用いたしません。		
販売店	※お買い上げ時のレシートを送付してください。		お買い上げ日  年 月 日  保証期間

**JOVS**

TTU株式会社  
福岡市博多区店屋町8-27 呉服町駅前ビル 3F

JOVS お客様窓口  
TEL: 0570-092-200 Eメール: jovs@ttu.co.jp