

JOVS Dora

取扱説明書

本製品を使用する前に、スキンケア用品を肌に塗らないでください。取扱説明書をよく読み、正しい手順でご使用ください。取扱説明書は以降の閲覧に備え、大切に保管してください。製品の使用に際しご不明な点がございましたら、お客様窓口までお問い合わせください。

-  危険：誤操作により死亡や重傷を負うおそれのある内容です。
-  警告：誤操作により危険な事故やトラブルを引き起こす可能性のある内容です。
-  注意：誤操作により軽症を負うことや財産の損害が発生する可能性のある内容です。

⊗ 危険

- ⊗ 製品が破損した場合は使用を停止し、内部の部品には触れないでください。感電の恐れがあります。
- ⊗ 製品に関連性のない物体を挿入したり、適切ではない保管場所に放置しないでください。
- ⊗ 本製品を目の周りで使用しないでください。通常の使用範囲においてはゴーグル装着により問題なくご使用いただけますが、目の周りでの使用は眼球によるメラニン吸収を完全に阻止できない可能性があります。使用前に必ずゴーグルを装着してください。照射は眼球に直接影響を及ぼすものではありませんが、高頻度のフラッシュ光線は視力に影響を及ぼす可能性があります。
- ⊗ 背中部分のケアを行う際は、安全確保の為、ご自身ではなく他の人に照射してもらってください。
- ⊗ ケア前の毛の長さが1mmを超える場合、事前にカミソリによる除毛をお勧めします。毛が長すぎると熱を吸収し、肌の赤みや腫れの原因となります。また毛が焦げることによるにおいが発生し、製品を快適にご使用いただけない場合があります。
- ⊗ ケアする部位が濡れていたり清潔でない場合、効果に影響が出る恐れがあります。また正常に照射できない、適切でない光線を放出する等の不具合につながります。
- ⊗ 本製品は15歳以下の児童の使用における身体への影響のデータが整っていません。該当する年齢のお子様には本製品を触れさせないでください。また製品を使用する際も離れたところで行ってください。

- 使用する体の部位に応じて照射出力を調節してください。出力は初めはレベル1に設定し、徐々に上げてください。(ご自身の使用状況や肌の許容程度に従って行ってください)。

❗ 警告

- ❗ 本製品は水を張った浴槽やシャワー室、洗面器等の近くで使用しないでください。
- ❗ 本製品でお子様を遊ばせないでください。
- ❗ 小さなお子様や本製品を正しく使用できない可能性のある方(からだの不自由な方、精神障害をお持ちの方)は、必ず保護者及び介助者の監督責任のもとで本製品をご使用ください。(本体メンテナンスを含む)
- ❗ ワキ部分の照射直後に制汗剤を使用しないでください。
- ❗ 製品の故障や照射障害を防ぐため、照射口の異物や汚れは定期的に取り除いてください。また故障や発火の恐れがありますので、通気口を塞いだ状態で使用しないでください。
- ❗ 衣服や頭髮、その他不適切な場所に照射しないでください。焦げや変色、破損の原因となります。ペットへの使用もおやめください。
- ❗ 目の周りで使用しないでください。目を傷つける恐れがあります。
- ❗ 次に使用する際の故障や肌トラブルを避けるため、毎回の使用前後に本体製品に付着した毛やスキンケア用品をふき取ってください。

- ❶ 本製品と電源アダプターは湿気を避けてください。
- ❷ ご自身の肌の状態に合わせて製品の照射出力を調節してください。初めて使用する際は必ずレベル1から開始してください。
- ❸ ご使用後に肌が軽く熱をもったり赤くなるのは正常範囲内です。通常、30分程度で消えます。
- ❹ 背中部分のケアを行う際は、安全確保の為、ご自身ではなく他の人に照射してもらってください。
- ❺ 製品の電源を入れたまま放置しないでください。使い終わったらすぐに電源を切ってください。
- ❻ 製品を使用する前に、肌が清潔で乾いた状態、且つ表面に毛の残留物や油性の汚れがないことを確認してください。
- ❼ 製品の使用環境において20℃以上の温度差が発生する場合(寒い場所から暖かい場所へ移動する、もしくはその逆)は、電源を切った状態で2時間以上放置してからご使用ください。
- ❽ 燃えやすい物、場所(スプレー缶やガソリンスタンドを含む)の近くで使用しないでください。火災や感電等の危険性があります。
- ❾ 本製品の使用環境における適温は5～40℃となっております。使用前に室内の温度をご確認ください。
- ❿ ケア後48時間は、照射した部位に直接紫外線をあてないようにしてください。

- ❶ 照射口を黒い物に向けて照射しないでください。製品や照射対象物の損壊につながります。
- ❷ 本製品を太陽光の下に置いたり、紫外線のあたる場所に長時間放置しないでください。製品に重大な損傷をもたらす恐れがあります。
- ❸ 電源を入れた後、内蔵ファンが作動しない(ブーンという音がしない)場合は本製品を使用しないでください。
- ❹ 本製品の充電には必ず付属の充電用品をご使用ください。
- ❺ 充電ケーブルが破損した場合、不慮の事故を避けるため、必ず製造元もしくはアフターサービス機関までお問い合わせの上、純正品と交換してください。

▲ 注意事項



ケア前に日焼けしないでください




ケア前は前もって余分な毛を除毛し、肌を清潔にしてください。(ケアクリームやワックス等化学品を使用した除毛はお避けください)



暗い場所で使用しないでください




太陽光が直接あたる環境で使用しないでください。製品の故障につながります

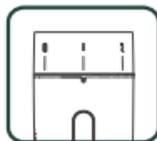

初めて使用する際は必ず照射出力レベル1からお試してください



使用中は必ずゴーグルを装着してください

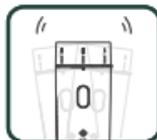

本製品を激しく叩いたり振ったりしないでください



使用する際、吸気口を塞がないでください

本製品を使用できない人や状況

- ・妊娠中や授乳中、生理中の女性、傷跡のある部位、糖尿病の人、肌が弱い人、光アレルギーのある人
- ・重度の心臓病、中～重度の高血圧、悪性腫瘍、毛のう炎、感染性の皮膚疾患、ヤケド、血液凝固障害のある人
- ・傷跡が残っている人や傷口が治りにくい人、皮膚の代謝異常による疾患のある人
- ・照射部位に静脈瘤や血管拡張などの血管疾患のある人
- ・照射部位に感染や発疹、病変、血腫等がある場合
- ・自己免疫疾患（HIV感染、全身性エリテマトーデス、ポルフィリン症等）のある人
- ・出血性の疾患のある人
- ・イソトレチノイン、AHA（フルーツ酸）、BHA（サリチル酸）、アゼライン酸を外用している人
- ・アスピリン、免疫抑制剤、イソトレチノインを服用中の人
- ・直近で光アレルギーの薬（テトラサイクリン、サルファ剤等）を使用した人
- ・粘膜などのデリケートな部位
- ・治癒していない傷口付近
- ・多毛症及びその他の疾病により起こる多毛症の人
（必要に応じて使用前に医師にご相談ください）

使用に際して注意が必要な人や状況

- ・30日以内に化学品(ケアクリームやワックス)を使用してケアした人、1週間以内に美白用品やビタミンAを含む化粧品を使用した人は慎重に使用してください。
- ・エッセンシャルオイルを含む製品と同時に使用しないでください。
- ・照射部位の肌は清潔且つ乾いた状態に保ち、ローションやオイル、その他の化粧品を使用しないでください。
- ・光の照射による損傷(日焼けを含む)がある人は肌の状態が回復してから使用してください。

以下の部位、状況での使用はお控えください

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 / 口の中、性器、粘膜など | 7 / 眉毛、頭髪 |
| 2 / 整形手術、医療手術をおこなった部位 | 8 / 耳 |
| 3 / 喉仏 | 9 / 乳首、乳輪 |
| 4 / 眼球、まぶた、目の周り | 10 / おへその内側 |
| 5 / ニキビ周辺 | 11 / 大静脈周辺 |
| 6 / あざ、ほくろがある部位 | 12 / 入れ墨、ボディーペインティングを施した部位 |

◆ 製品紹介

使用する部位に応じてモードを設定し、最も有効且つお肌を傷つけない範囲の照射エネルギーを採用することで、お肌を保護し不要なダメージをもたらしません。

本製品は6段階の照射強度を設定でき、お肌のデリケート度合いに合わせたカスタマイズが可能です。

JOVSシリーズの光美容器はご家庭もしくは個人での使用を想定して設計されており、商業用途での使用は推奨しません。

製品検証試験の結果より、黒以外のすべての肌色に効果を発揮することが分かっています。


本製品は製品寿命が長く、且つ部品交換の必要がない一体型モデルです。

製品仕様	
製品名	JOVS Dora
型番	Dora 1.0
照射面積	3*1=3cm ²
波長	590-1200nm
電源アダプタ	入力:100-240V~50/60Hz, 1.5A 出力:12V== 5.0A
定格入力	12V== 5.0A

製品構造


【部品名称】

- ①照射口
- ②照射ボタン
(3秒間長押しで自動照射モードに切替)
- ③スタンバイランプ(点滅時は照射可能)
- ④出力調整ダイヤル
(レベル1-6設定時:電源オン、0に戻す:電源オフ)

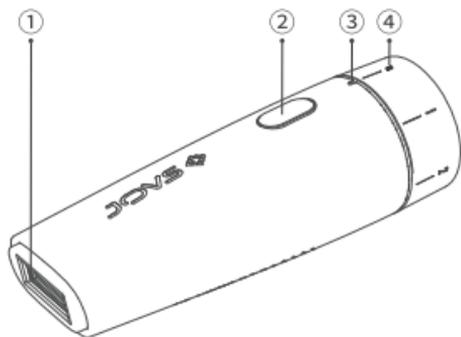

【部品名称】

- ①排気口
- ②吸気口
- ③電源差込口
- ④モード表示
(設定したいモードのマークをタッチします。
ライトが点灯しているマークが現在の設定モードです。)
- ⑤連続照射モード切替センサー
(軽くタッチしてオン/オフします。
ライト点灯時:連続照射モードオン
ライト消灯時:連続照射モードオフ)

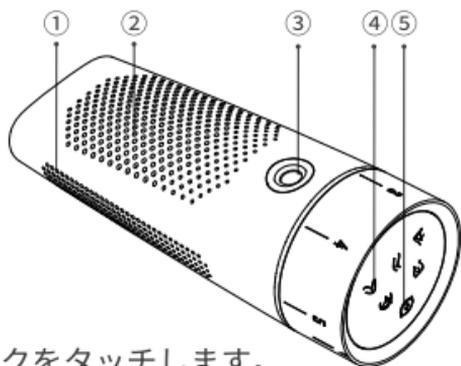

※ご使用の際、製品の吸気口および排気口を塞がないでください。
高温により警報音が鳴る可能性があります。

※製品の吸気口と排気口を塞がないでください。
故障するおそれがあります。

◆ 5つのモード

手動照射モードの使用方法

本製品は肌質や毛の太さに合わせた5つのモードが設置されています。

(ご使用の際はケア部位に合わせてモード選択してください。よりよいケア効果を得られるとともに、快適にご使用いただけます。)



◆ 使用前の準備

1. 肌が清潔で乾いた状態、且つ表面に毛の残留物や油性の汚れ(ローションや乳液等の残留物)がないことを確認してください。
2. 照射口に汚れや毛などの残留物や破損、異常がないことを確認してください。
3. 光美容器を使用する前に皮膚試験(パッチテスト)を行い、2時間後に肌の状態を確認してください。照射部位に異常がなければ安心してご使用いただけます。

照射強度設定

本製品は家庭用光美容器として開発しているため、光の強度が穏和に設計されています。6段階出力で光の強さを調整し、お肌や体毛の色、またご自身の快適性に合わせてご使用ください。

下の表を参考にご自身に適した光の強さをお選びください。

1/下の表を参考にご自身の肌と体毛の色に適した光の強さをお選びください。

肌色見本を肌に置いて、ご自身の肌色と比較してください。クイックスタートガイドは以降の参照に備えて保管をお勧めします。

2/痛みや不快感を感じる場合は照射出力を下げてください。濃い肌色は比較的光を吸収しやすいため、低めの出力での使用をお勧めします。出力強度によって肌に温かさや灼熱感を感じるがありますが、通常痛みを伴うことはありません。

出力レベル参照表(肌色見本)

体毛の色	肌色						
	フィルターアタッチメント装着の有無						
ダークゴールド/ 淡いブラウン	アタッチメントなし	1-6	1-6	1-5	1-4	1-3	×
	アタッチメント装着	1-6	1-6	1-6	1-6	1-5	×
ブラウン	アタッチメントなし	1-6	1-6	1-5	1-5	1-3	×
	アタッチメント装着	1-6	1-6	1-6	1-6	1-5	×
ダークブラウン	アタッチメントなし	1-6	1-6	1-5	1-5	1-4	×
	アタッチメント装着	1-6	1-6	1-6	1-6	1-5	×
黒	アタッチメントなし	1-6	1-6	1-6	1-5	1-4	×
	アタッチメント装着	1-6	1-6	1-6	1-6	1-5	×

(注意:上記の表で「X」記号がある肌色は本製品の使用に適していません。)

注意:白、グレー、赤、金色の体毛も本製品の使用に適していません。

注意:さまざまな要員(照射する時間や環境条件等)により、肌が異なる反応を起こすことがあります。

❖ 皮膚試験(パッチテスト)

本製品を初めて使用する際、もしくは直近で日焼けした際は、ケアする各部位で皮膚試験を行ってください。皮膚試験は照射に対する肌の耐性を確認するために行うものであり、これによって各部位に適した出力レベルを設定していただくことができます。

1. ケアしたい部位の近くで行います

注意: 照射するのが難しい部位や肌がデリケートな部位(足首や骨格部分)は避けてください。

2. 光美容器の照射出力がレベル1になっているのを確認してください。

3. 光美容器を照射部位に垂直にあて、照射口を肌に密着させます。

4. 照射ボタンを押して照射します。

5. 光美容器を肌の上で滑らせるように次の照射部位に移動します。

6. 出力レベルを1段階上げて照射します。以降同様に繰り返します。

7. 2時間後に肌の状態を確認し、異常(赤み、水ぶくれ)がなければ本製品を安心してご利用いただけます。

◆安全なケアのために

各項目をご確認ください

1、ワキのケア

●ケア前にワキに塗った制汗剤や香水、ローション等の化粧品を洗い流してください。たるみのある部位をケアする際は、指でたるみをのぼして照射してください。照射時に軽い灼熱感を感じるがありますが、これは正常な現象です。

2、VIOのケア

●色素沈着がある、または肌色が濃い部位への照射は低めの出力で行ってください。ご自身で慣れるまではレベル1をお勧めします。

3、腕・脚のケア

●骨など隆起のある部位は他の部分に比べて痛みを感じやすいため、照射の際はご注意ください。

4、以下の部位にはご使用いただけません

●ヤケド跡、特に色が濃い部位、目の周り、凍傷やほくろ・アザのある部位、入れ墨のある部位、眉毛、頭髪、こめかみ等の部位。

●ケア後48時間は紫外線を避け、太陽光にケア部位が直接露出しないようにしてください。外出時は日焼け止めをお使いください。

●照射時にフラッシュを直視しないようご注意ください。

❖ 操作方法

ケアモード／手動操作時の手順

01




剃刀でケア部位を除毛し、肌を清潔にしてください。

02



電源に接続するとスタンバイランプが点灯します。

03

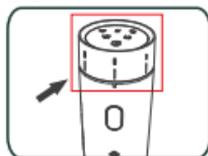

出力調整ダイヤルを回して電源を入れます。初回はレベル1からのスタートをお勧めします。使用中お肌に問題がない場合、出力レベルが高ければ高いほどより良いケア効果を得られます。

04



モード表示のマークをタッチしてケアモードを設定します。
(スクリーン上に各モードのマークがあります)

05



保護メガネを着用します。ケア部位に垂直に照射口をあて、照射ボタンを押します。照射口が皮膚に密接していない場合はボタンを押しても照射しません。(照射ボタン3秒長押し、または連続照射モード切替センサーをタッチすると、そのまま連続照射に移行します。)

❖ 電源の停止及びファンの稼働

すべてのモードで、3分間製品を使用をしないと、自動的に電源が切れます。また、スタートから30分で強制的に電源が切れます。

電源が切れた後、ファンは60秒間稼働し、製品の放熱処理が行われます。この間は電源プラグを抜かないでください。放熱処理は製品の大事なメンテナンスとなります。ファンが停止するのを待って電源プラグを抜いてください。

◆ 使用後のお手入れ

- ケア後6時間は、照射部位は水に濡れないようにし、その後は保湿液で保湿してください
- ケア後の香水パックやスクラブを含む化粧品の使用はご遠慮ください
- ケア後24時間は、紫外線を避けるようにし、必要に応じて、日焼け止め用品を塗ってください
- タンニング中のケアはお控えください
- ケア後に整形手術行う場合は、医師に相談してください
- 不調を感じた際は、医師に相談してください

◆ 使用間隔

時 間	1～4週目	5～8週目	8週目以降
使用頻度	3～4回/週	2～3回/週	1回/半月～1ヵ月

※体毛の成長速度に合わせて複数回使用してください。
毛の密度が濃い場合は回数や出力レベルを上げる等、
ご自身の状況に合わせてご使用ください。

◆ メンテナンスについて

製品を長く快適にご使用いただくために、毎回のご使用の前後に製品についた埃や毛を取り除き清潔にメンテナンスしてください。メンテナンスを怠ると期待した効果が得られないことがあります。



1. 本体(特に照射口付近とアタッチメント)を点検し、清潔であることを確認してください。
2. 本製品とその付属品は水洗いできません。(食洗機等での洗浄含む)
3. ステンレスたわしや研磨剤入りクリーナー(歯磨き粉含む)、腐食性の液体(ガソリン、機械油、アセトン等)を使用しないでください。

※注意:照射口付近が清潔にならない場合は製品の使用を停止してください。



1. 照射口付近をメンテナンスする際は、電源プラグを抜き、対象部分が冷たくなったことを確認してから行ってください。(使用中とその直後は発熱しています)

2. 必要に応じて柔らかい布などで製品外側を拭いてください。

3. 柔らかい布に数滴水をしみこませ、照射口と冷却面を拭き取ります。

※水で汚れが落ちない場合、高濃度アルコール(96%以下)を数滴使用して清掃できます。

廃棄について



本製品は家庭ごみとして廃棄することができません。自治体等が指定する方法で処理してください。

よくある問題と対処法

本製品の使用に際し、よくあるご質問をまとめています。以下の内容をご確認いただき、問題が解決しない場合は、お客様窓口にお問い合わせください。

問題	考えられる原因	解決方法
電源が入らない	電源の接続不良	電源がしっかりと接続されているか確認してください
照射できない	本体が過熱状態 ----- 本体が皮膚に密着していない	製品の自然冷却を待ち、使用してください。 ----- 本体を皮膚に密着させて照射ランプの点滅を待ちます。
スタンバイランプが点灯しない	故障の可能性	電源接続の状態でのこの症状の場合は故障の可能性があります。お客様窓口までご連絡ください。
照射時に異臭がする	光学フィルターの汚れ ----- 皮膚の体毛が焦げている	汚れをふき取ってください。 ----- ケア前に除毛してください。
ケア時の痛み	照射部位に体毛がある ----- ケアに適さない部位に照射している ----- 照射レベルが強い ----- 反射板の破損	ケア前に除毛してください。 ----- 陰唇、膣、高温、乳首、乳輪、目の周りへの使用は避けてください。男性は陰囊や陰茎への使用は避けてください。 ----- 痛みを感じない強度で使用してください。 ----- 製品の修理または交換をしてください。

問題	考えられる原因	解決方法
照射部位の赤み	正常な反応	使用を中止し症状が治まることをお待ちください。 症状が治まらない場合は、 医師に相談ください。
	過剰な反応	
ケアの効果が 感じられない	光の強度不足	強度の設定を上げてください。
	照射位置のずれ	ケアしたい部位に照射をしてください。
	体毛の色	明るい色の体毛（金、銀、 グレー、赤、白等）は使用 に適しておりません。
	使用方法	本書で説明している手順や 頻度等の使用方法に沿って ご使用ください。
	肌質や毛質	正しい使用方法で6ヵ月は 製品を使用してください。
使用中、製品に 熱がこもる	正常な現象	特に処置の必要はありません。
脇モードのランプ が点滅	連続使用等により製品 が熱くなりすぎ、 過熱保護機能が稼働	製品を風通しのいい場所に 置くなど、自然冷却される ことを待ってご使用くださ い
<p>上記で問題が解決しない場合は、お客様窓口にお問い合わせください。</p> <p>日本国内で修理・交換・アフターサービスをお受けになる際は、日本国内正規販売ルートで購入時レシート及び保証書が必要となります。この取扱説明書とともに大切に保管をお願いいたします。</p>		

特別説明

JOVSは取扱説明書の説明と改訂に対して責任を負い、その内容においてできる限り正確性を確保するよう努めます。本取扱説明書の内容は詳細な検討を経て作成しておりますが、万が一印刷の誤りや漏れがあった場合、法律の許す範囲において当社が最終解释权を有します。同時に当社は製品及びその取扱説明書において改善や修正を行う権利を有します。製品の構造は予告なく変更されることがあります。本取扱説明書に掲載された図は概略となっており、参考用です。実際の製品と図が一致しない場合、製品本体に準じます。

環境保護リスト

部品名	製品中の有害物質の名称及び含有量					
	有毒有害物質や元素					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	銅 (Cd)	六価 クロム (Cr(VI))	ポリ臭化 ビフェニル (PBBs)	ポリオースト ラリアンジフェ ニルエーテル (PBDEs)
電子部品	X	○	○	○	○	○
金具部品	○	○	○	○	○	○
プラスチック 部品	○	○	○	○	○	○
パッケージ 素材	○	○	○	○	○	○

この表は、SJ/T 11364の規定に従って作成されています。

○: この有害物質のこの部品のすべての均質材料中の含有量はすべてGB/T 26572-2011で規定された制限量以下であることを示します。

X: この有害物質は、少なくともこの部品のある均質材料中の含有量がGB/T 26572-2011で規定された制限量を超えていることを示します。

(この表に表示された「有害物質」およびその使用部品は製品を正しく使用している限り人体や環境に有害な影響を与えることは一切ありません。消費者や回収処理業者に関連物質の情報を提供し、製品廃棄時に適切に処理するために記載しています。)



本取扱説明書で述べた正常使用条件では、本製品の環境保全使用期間は10年です。環境保全使用期間中は安心して使用でき、環境保全使用期限を超えた後はリサイクル循環システムに入るべきです。

保証書

日本国内において保証をお受けになる際はこちらが必要になります。

大切に保管をしてください。

品名	
----	--

製造番号	
------	--

お客様	ご住所・お名前・電話番号
	保証書に記入されたお客様の個人情報は、製品の修理や交換等のみに使用いたします。このほかの用途で使用いたしません。

保証書

日本国内において保証をお受けになる際はこちらが必要になります。
大切に保管をしてください。

お買い上げ日

年 月 日

保証期間

お買い上げ日より 1 年間

販売店

JQVS 

輸入販売元
TTU 株式会社

住所 福岡県福岡市博多区店屋町 8-27 呉服町駅前ビル 3F

お客様窓口 TEL：092-600-1197 Eメール：jovs@ttu.co.jp