

JOVS

取扱説明書

【安全上のご注意】

本製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度について説明しています。

- ⊘ 危険：死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
- ❗ 警告：危険な事故やトラブルを引き起こすおそれがある内容です。
- ⚠ 注意：軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

⊘ 危険



- ペースメーカー、心電計、人工心肺装置、点滴器などの医用電気機器をご使用の方は、本製品の使用をしないでください。（医用電気機器の誤作動による事故や体調不良の原因になります。）
- 本製品を浴槽、シャワー、洗面器など水のかかる場所の近くで使用しないでください。本製品を湿気がない場所で保管してください。特に電源挿し口の周りを清潔に保ち、水などに濡れないようにしてください。
- 暖房器具のストーブやエアコンの温風など直接当たる高温の場所で使用しないでください。（事故や故障の原因になります。）
- 製品本体、リモコン、電源コードが破損している場合は、使用しないでください。（感電などの危険性があります。）
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

- ・本製品は防水仕様ではありません。水洗いや水没などしないでください。（製品が故障の原因になります。）万一水没した場合は、継続の使用はしないでください。

❗ 警告



- ・本製品は顔専用です。他の部位には絶対使用しないでください。
- ・製品を正常にご使用いただくため、無断で分解、改造、修理を行わないでください。
- ・光感受性成分や酸性成分を含むスキンケア製品と同時に使用しないでください。

下記の方は使用しないでください。

- ・感染症疾患のある方
- ・糖尿病の方
- ・黒皮症の方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・妊娠中や授乳中の方
- ・ケロイド体質の方
- ・日焼けで肌にダメージを受けた方
- ・常用薬を服用している方
- ・がん、特に皮膚がんや前癌病変の方
- ・傷の治りに異常のある方
- ・自己免疫疾患のある方
- ・過去3ヶ月以内に顔にボトックスの施術を受けた方
- ・化学繊維によるシミや接触性皮膚炎のある方
- ・長期にわたりステロイドホルモン薬を使用している方や肝機能障害で毛細血管問題を抱えている方
- ・18歳未満の方
- ・心臓疾患のある方
- ・血圧に異常のある方
- ・精神疾患のある方
- ・光線過敏症の方

● 次のような方は、医師にご相談のうえ、ご使用ください

- ・使用部位に永久的なフィラーや一時的な皮下フィラーがある場合
- ・通院治療中の方
- ・医療美容の施術を受けた方

● 下記の場所や部位には使用しないでください。

- ・推奨されていない部位
- ・化粧品の使用による炎症部位
- ・日焼け後にダメージを受けた部位
- ・太田母斑のある部位
- ・広範囲にわたる病変や傷口
- ・かゆみなど伴う赤みや物理的刺激による病変した斑点やシミなど

▲ 注意

- ▲ 本製品を操作する前に手を清潔にし、手が乾いた状態でご使用ください。
- ▲ 本製品は精密機器であるため、折り曲げたり、引っ張ったり、重いものを上に置いたりしないでください。（回路のショートを引き起こし、製品の使用に支障をきたす可能性があります。）使用後は適切に収納し、保管してください。
- ▲ 使用時間及び使用頻度は、取扱説明書の記載通りに従ってください。
- ▲ 本製品の使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- ▲ 本体や電源に衝撃を与えないでください。

【パッケージ内容】



美肌フェイスマスクマシン
(コントローラー含む)




TYPE-C 充電ケーブル



保証書




取扱説明書

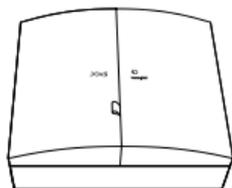


収納ケース

【操作方法】

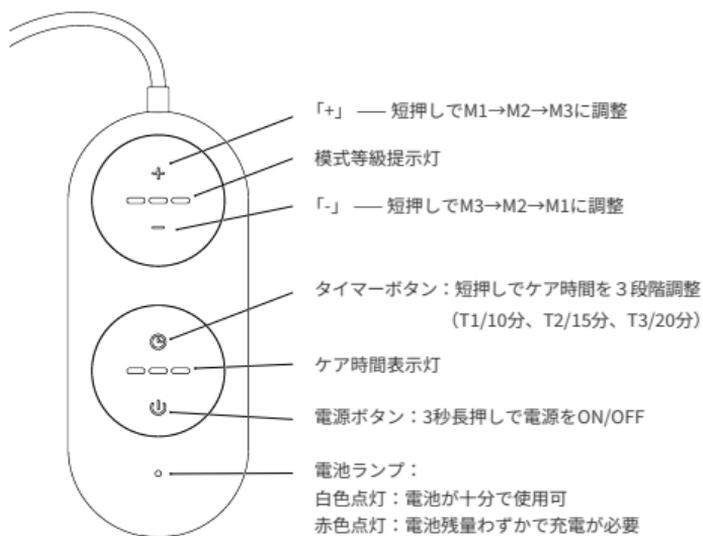

【各モードの説明】

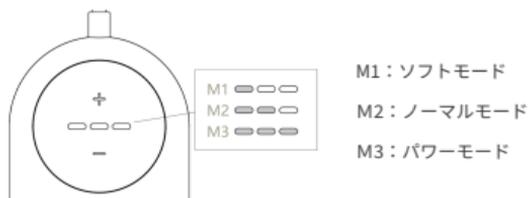

【各モードとケア時間の組み合わせおすすめ使用例】

Plan1 ソフトモードM1/10分 + パワーモードM3/10分

適用肌：乾燥・敏感肌、脂性肌

Plan2 標準モードM2/10分 + パワーモードM3/10分

適用肌：混合肌

Plan3 標準モードM2/15～20分

適用：混合肌

Plan4 パワーモードM3/15～20分

適用：混合肌

【操作方法】

使用前に必ず肌テストを実施してください。

1分間程度フェイスマスクを着用して不快感などないか確認してください。肌テストしてから約30分後お肌に異常などなければ、本製品をご使用いただけます。


テスト後一旦電源を切って再使用時に電源を入れ直してください。使用中で中断する場合は、必ず電源を切ってから製品を収納ケースに収納してください。

電源の入れっぱなしは製品の故障に繋がりますのでお控えください。



STEP 1: 顔を洗顔し、肌を清潔な状態にしてください。(顔にある余分な水分を拭いてください。)


STEP 2: 固定バンドを調整し、フェイスマスクを装着します。

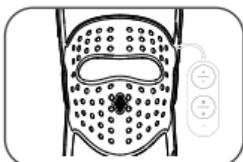

STEP 3: コントローラー上で、2秒間電源ボタンを長押しして電源を入れ、白いランプを点灯させます。



STEP 4: タイマーボタンを短押しして、ケア時間を調整します。(デフォルトではT1/10分のケア時間になります。)

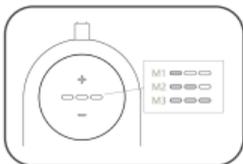

STEP 5: 3つのモードから適切なモードを選択し、「+」や「-」ボタンにて短押し調整します。



STEP 6: 設定された時間でケアが終了すると自動的に電源が切れます。ケア後は日頃の肌のお手入れ手順で保湿してください。

【充電方法】



STEP 1：本体の電源を切ってから充電ケーブルに繋いでください。充電中に本体の電源を入れしないでください。

STEP 2：コントローラーのランプが赤色点滅すると充電中であり、白色点灯すると充電が完了しています。

- ・電池残量が不足している場合、コントローラーの電源ランプが赤色に点灯します。赤色のランプが点灯したら直ちに充電してください（無理に継続使用すると製品の故障に繋がります）。

【使用頻度】

- ・毎日ご使用いただけます。使用后、必ず保湿ケアを行ってください。
 - ・1日に最大2回までご使用可能で、2回の合計時間は30分を超えないでください。
- ※お肌の状態に合わせて、ソフトモード～パワーモードまで徐々に上げて試してみてください。無理にパワーモードを使用しないでください。

【製品の保護/クリーニング・メンテナンス】



製品を長く快適にお使いいただくために、使用後は必ず収納ケースにて保管してください。
(ほこりや湿気、または落下事故や外力の衝撃など不慮のトラブルから機器を守ります。)



本製品をクリーニングする際は、清潔の柔らかい綿質の布で少し水で濡らし、マスクの溜まった汚れ部分を清掃してください。



本製品（内蔵バッテリー）は家庭ごみとして廃棄することができません。自治体等が指定する方法で処理してください。

【よくある質問と対処法】

問題の現象	故障判断	処置方法
電源コントローラーが起動しない	電源が充電されているかどうか	充電ケーブルを接続し、製品が正常に動作することを確認
フェイスマスク内の一部のライトが点灯しない	座ったり、折ったりしたかどうか	すぐに修理または製品の返品を行う
長時間放置して電源が入らない	バッテリーが低電力モードになっている	充電ケーブルを接続してから、再度電源を入れて使用する

【特記事項】

JOVSは取扱説明書の改訂及び解釈に対して全ての責任を負い、その内容においてできる限り正確性を確保するよう努めます。本取扱説明書の内容は慎重な検討を経て作成しておりますが、万が一印刷漏れや誤記等がございましたら、法律の許容する範囲内で弊社が最終的な解釈権を有します。同時に弊社は製品及び取扱説明書において、修正や改訂の権利を有します。製品の構造は予告なく変更されることがあります。本取扱説明書に掲載された図は概略となっており、参考用です。図と実物が一致しない場合、製品実物に準じます。

【部品名】

部品 名称	製品における有害物質又は元素の名称					
	有害物質又は元素					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBBs)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDEs)
電子部品	X	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

この表はSJ/T 11364の規定に基づいて作成されています。

×：この有害物質は、該当部品のすべての均質材料において、GB/T26572-2011の規定制限値以下であることを示します。

○：この有害物質は、該当部位の少なくとも1つの均質材料でGB/T26572-2011の規定制限値を超えていることを示します。

この表に記載の「有害物質」及び対応する部品は、製品の正常な使用状態で体や環境に任意の傷害と影響を与えません。これは消費者と回収処理業者に提供する物質の説明であり、製品廃棄時の適切な処理を行うためのものです。

【製品仕様】

製品名称	JOVS 4D Foucs mask
製品型番	JM2
製品サイズ	499mm*256mm*200mm
重さ	395g (本体+コントローラー)
電源ケーブル長	75cm
出力電力	6W