



使用方法動画はこちら

取説説明書に従い、正しい手順で製品を組み立ててご使用ください。不明点がございましたら、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 危険：誤操作により死亡や重傷を負うおそれのある内容です。

⚠ 警告：誤操作により危険な事故を引き起こす可能性のある内容です。

⚠ 注意：誤操作によりケガや物品の損傷が発生する可能性がある内容です。

⚠ 危険

- 本製品は水を張った浴槽やシャワー室、洗面器或いは他の入れ物類等の近くで使用しないでください。
- 本製品でお子様を遊ばせないでください。
- からだの自由な方、精神障害をお持ちの方は、必ず保護者及び介助者の監督責任のもとで本製品をご使用、清潔、メンテナンスをしてください。
- 製品本体及び電源アダプターを濡らさないでください。
- 製品は破損や故障が生じた場合、直ちに使用を停止し、機器内部の部品を触らないでください。感電の恐れがあります。
- レーザー光を直接目に向けて当てないでください。
- 通気口を塞いだ状態で使用しないでください。機器の故障や発火につながります。
- 本製品は15歳以下の児童の使用における身体への影響のデータがありません。お子様には本製品を触れさせないでください。また製品を使用する際も離れたところで行ってください。

⚠ 警告

- 照射口付近に消磁しやすい物品を近づけないでください。機器の故障や破損につながります。
- 衣服や頭髮、その他不適切な場所に照射しないでください。ケガの原因となります。
- ケガの原因となりますので、ベッドへの使用はおやめください。
- 本製品を目の周りで使用しないでください。目を傷つける恐れがあります。
- 機器の使用環境において20°C以上の温度差が発生する場合（低温から高温環境への移動、もしくはその逆）、電源を切った状態で2時間以上放置してからご使用ください。
- 燃えやすい物、場所（スプレー缶やガソリンスタンドを含む）の近くで使用しないでください。火災や感電等の危険性があります。
- 本製品の使用環境における適温は0～40°Cとなっております。使用前に室内の温度をご確認ください。
- 製品を使用後、すぐに照射口に触らないでください。照射口は高温となり火傷のおそれがあります。
- 本製品を直射日光の下に置いたり、紫外線のあたる場所に長時間放置しないでください。機器に重大な損傷をもたらす恐れがあります。
- 電源を入れた後、内蔵ファンが作動しない（ブーンという音がしない）場合は本製品を使用しないでください。製品の故障につながる恐れがあります。
- 本製品を長時間にわたって連続使用しないでください。30分間使用した場合、一旦電源を切って10分放置し、再度使用してください。


⚠ 注意

- ▲ 本製品を使用する部位が濡れていたり清潔でない場合、効果に影響が出る恐れがあります。また正常に照射できない、適切でない光線が放出する等の不具合につながります。
- ▲ 使用部位に応じて照射出力を調節してください。初回は必ずレベル1から使用をスタートし、徐々に上げてください（使用する際、ご自身の使用状況及び肌の許容程度に合わせて、行ってください。）
- ▲ ワキ部分の照射直後に制汗剤を使用しないでください。
- ▲ 製品使用への影響を防ぐため、照射口の汚れは定期的に取ってください。
- ▲ 次に使用する際の故障や肌トラブルを避けるため、毎回の使用前後に本体機器に付着した毛やスキンケア用品を拭き取って清潔にしてください。
- ▲ ご使用時は肌を清潔にし、肌の表面が完全に乾いていて毛の残留物や油性の汚れがないことを確認してください。
- ▲ 使用後48時間は、ケアした部位に直接紫外線を当てないようにしてください。
- ▲ 本製品は白髪やグレイヘアのケアには適していません。
- ▲ 本製品を激しく叩いたり振ったりしないでください。
- ▲ 機器の故障を防ぐため、電源を切っていない状態で直接プラグを抜かないでください。

本製品を使用できない人や状況

- ・ 妊娠中や授乳中、生理中の女性、傷跡のある部位、糖尿病の人、肌が弱い人、光アレルギーのある人は決して使用しないでください。
- ・ 重度の心臓病、中～重度の高血圧、悪性腫瘍、毛のう炎、感染症の皮膚疾患、ヤケド、血液凝固障害のある人は決して使用しないでください。
- ・ 傷跡が残っている人や傷口が治りにくい人、皮膚の代謝異常による疾患のある人への使用はお避けください。
- ・ 血管疾患のある人、照射部位に静脈瘤や血管拡張症のある人への使用はお避けください。
- ・ 敏感肌に光に反応して湿疹やアレルギーを発症しやすい人への使用はお避けください。
- ・ 自己免疫疾患（HIV感染、全身性エリテマトーデス、ポルフィリン症等）のある人への使用はお避けください。
- ・ 出血性の疾患のある人、イソトレチノイン、AHA（フルーツ酸）、BHA（サリチル酸）、アゼライン酸を外用している人は決して使用しないでください。
- ・ 30日以内に化学品（ケアクリームやワックス）を使用してケアした方は慎重に使用してください。
- ・ 1週間以内に美白用品やビタミンAを含む化粧品を使用しただ人は慎重に使用してください。
- ・ エッセンシャルオイルを含む製品と同時に使用しないでください。照射部位の肌は清潔且つ乾いた状態に保ち、ローションやオイル、その他の化粧品を使用しないでください。

【各部名称】

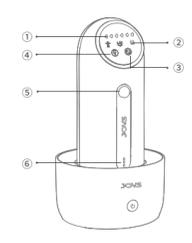

- 1/ 口の中心、性器、粘膜等
- 2/ 整形手術、医療手術を行った部位
- 3/ 喉仏
- 4/ 眼球、まぶた、目のまわり
- 5/ ニキビや吹き出物がある部位
- 6/ あざ、ほくろがある部位
- 7/ 眉毛、頭髮
- 8/ 耳
- 9/ 乳首、乳輪
- 10/ おへその内側
- 11/ 大静脈
- 12/ 入れ墨、ボディペインティングを施した部位

注意：上記の表はすべてを網羅しているわけではありません。ご自身が本製品を使用できるかわからない場合、事前に専門医に確認してください。

01

製品本体及び電源アダプターを濡らさないでください。

02

製品は破損や故障が生じた場合、直ちに使用を停止し、機器内部の部品を触らないでください。

03

ケガの原因となりますので、ベッドへの使用はおやめください。

04

本製品は白髪やグレイヘアのケアには適していません。


05

30日以内に化学品（ケアクリームやワックス）を使用してケアした方は慎重に使用してください。

【各部仕様】

規格・パラメータ	
製品名称	JOVS mini
型番	J927(mini1.1)
照射口面積	2.5cm ²
波長	530-1200nm
電源アダプター	入力：100-240V～50/60HZ,1.0A 出力：24V ≒ 2.5A

【各部名称】

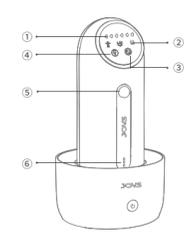


- 1 操作パネル：照射出力表示（左から右順：1～6段階）
- 2 操作パネル：モード表示
- 3 操作パネル：モード切り替えボタン
- 4 操作パネル：自動連続照射ボタン
- 5 照射ボタン（2秒間長押しで自動照射モードに切替）
- 6 電池残量表示（3×モーター）

【各モード】



全身モード
顔モード
VIOモード
SRモード

【各モード】

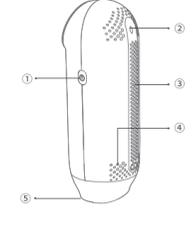

- 1 電源ボタン長押し2秒：電源ON/OFF短押し：照射出力調整（1～6段階）
- 2 電源差し込み口
- 3 吸気口
- 4 排気口
- 5 照射口

4種類のモード

本製品は、ご利用になりたい部位に合わせた3つのモードに加え、SRモードをご用意しております。

ご利用の際は、適したモードをお選びください。

全てのモードにおいて、3分間使用されない場合は自動で機器の電源が切れます。また30分間連続で使用した場合も強制的に電源オフとなり、電源が切れた後、60秒間ファンが作動して機器の放熱を行います。ファンの作動中は電源プラグを抜かないでください。

【各モード】



- 01 水でカミソリの刃を濡らせ、ケア部位の毛を除去し、洗淨します
- 02 電源に接続し、電源ボタンを長押しして電源を入れます。機器両側のライトが点灯します
- 03 電源ボタン短押しで照射出力を調整します。はじめてお使いの際はレベル1からお試しください。
- 04 ボタンにタッチしてモードを選択します。
- 05 保護メガネを装着してから、照射面に肌に密着させて照射ボタンを押します。本製品がきちんと肌に密着していない場合は照射ボタンを押しても光が照射されません。（照射ボタンを2秒間長押しすると、またはタッチセンサーする、連続照射モードに移行します）

◆ご使用前の準備

1. 肌を清潔にし、肌表面が完全に乾いていて毛や油性の残留物（アロマトイル・ローション等を含む）がないことを確認してください。
2. 照射口に埃や毛の残留物がないこと、破損や異常がないことを確認します。汚れがある場合は必ずクリーニングを行なってください。製品の故障及び劣化、肌の問題を引き起こす原因となる恐れがあります。
3. ご使用前に皮膚試験（パッチテスト）を行い、2時間後に肌の状態を確認してください。照射した部位に異常が見られなければ、安心して製品をご使用いただけます。

照射強度設定

以下の表を参考にご自身の肌色と毛色に合わせて照射出力を調整してください。

確認方法：ご自身の肌色と比較します。痛みや赤味が生じた場合は照射出力を下げてください。肌の色が暗めの方は、低い出力での使用ください。

出力レベル参照表（肌色見本）						
肌色						
毛色						
暗めの金色/明るい茶色	1-6	1-6	1-5	1-4	x	x
茶色	1-6	1-6	1-5	1-5	x	x
薄い茶色	1-6	1-6	1-5	1-5	x	x
黒色	1-6	1-6	1-6	1-5	x	x

（注意：上記の表で「x」記号がある肌色は本製品の使用に適していません。）

注意：白、灰、赤、金色の体毛も本製品の使用に適していません。

注意：さまざまな要因（照射する時間や環境条件等）により、肌が異なる反応を起こすことがあります。

◆皮膚試験（パッチテスト）

初めて本製品をお使いいただく場合、または直近でタンニングを行った場合は、照射予定部位で皮膚試験（パッチテスト）を行い、それぞれの部位に最適な出力レベルをお確かめください。手の皮膚試験を行う場合；

1. 照射予定部位を除去します。
2. 体モードを選択し、出力レベルを1に設定して照射口を肌に当て、1回照射します。
3. 出力レベルを2に上げて、照射口を近くの別の場所に移動し、1回照射します。
4. 同じ要領で操作を繰り返して、徐々に出力レベルを上げてお肌に快適な照射強度を決めてください。

（注意：皮膚試験後2時間経って異常がなければ、その出力レベルで継続してご使用いただけます。赤くなるなどの症状が見られる場合はより低い出力レベルに設定して機器をご使用ください。）

◆ご使用後のスキンケアについて

- ・ ケア後6時間は水との接触を避けてください。化粧水で照射部位を保湿することをお勧めします。
- ・ ケア後は香水やパック、スクラブを含む化粧品を使用しないでください。
- ・ ケア後48時間以内は紫外線を避け、必要に応じて日焼け止めをご使用ください。
- ・ 本製品の使用期間を通して、日焼けサロン等での人工的な日焼けはおやめください。
- ・ ケア後、美容整形手術を行う場合は医師にご相談ください。
- ・ 機器の使用に際して気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

◆使用間隔

時間	1-4回目	5-6回目	6回目以降
使用頻度	毎週3-4回使用	毎週2-3回使用	半月-1ヶ月に1回使用

※毛の成長速度に応じて使用回数を調整してください。毛の密度が高い人は回数とともに出力レベルを上げる等、ご自身の状況に合わせてご使用ください。

◆クリーニングとメンテナンス

製品を永くより良い使用効果でご利用いただくために、毎回の使用の前後に製品についた埃や毛を取り除き清潔にしてください。メンテナンスを怠ると期待した効果が得られないことがあります。

1. クリーニング前に必ず電源を切り、プラグを抜いて機器を冷却してください。
2. 機器（特に照射口及び本体部品）を点検し、清潔であることを確認してください。
3. 本製品とその付属品は水洗いできません。（食洗機等での洗浄含む）
4. ステンレスたわしや研磨入りクリーナー（歯磨き粉含む）、腐食性の液体（ガソリン、機械油、アセトン等）を使用しないでください。

※注意：照射口が清潔にならない場合は、本製品の使用を停止してください。

本製品を廃棄の際は、自治体の規則に従ってください。

◆よくある問題と解決方法

本章では製品に関するよくある問題及び解決方法をまとめています。下記の内容をご確認ください。それでも問題が解決しない場合はお客様窓口までお問い合わせください。

問題	考えられる原因	解決方法
電源が入らない	電源がきちんと接続されていない	電源がきちんと接続されているか確認してください
電源が落ちる	ご利用の電源の状況が安定していない	※1か所のコンセントや電源タップに複数の電気機器を接続している、いわゆる「たこ足配線」の状態にあると、本製品の電源が落ち使用できない場合がございます
照射できない	照射時に照射口が肌に密着していない	照射口を肌に密着させ、スタンバイランプが点滅することを確認してください

◆問題

問題	考えられる原因	解決方法
照射時に異臭がする	フィルターアタッチメントが汚れている	フィルターアタッチメントを拭き取り清潔にしてください
	毛の剃り残しがある	除毛のうえご使用ください
ケア時の痛みが感じられない	照射部位が本製品の使用に適していない	※カミソリ負けを起こしてしまっ場合は肌の回復を待ってからご使用ください
	出力レベルが高すぎる	本説明書をお読みの上、適切な部位にご使用ください
	照射口の破損	使用をお控えください
ケア後、照射部位が赤くなってしまった	軽い赤みは正常反応	使用を中断し、お肌を休めてください お肌の落ちつきを待ってから再度ご使用ください

◆問題

問題	考えられる原因	解決方法
出力レベルが低すぎる	次回使用時に出力レベルを上げてください	
照射箇所の間隔を空けすぎている	照射する部位を隣り立てて丁寧に照射してください	
照射する領域が狭すぎる	各部位が多少重なるように機間なく照射してください	
一部の毛の色が本製品の使用に適していない	本製品は濃い金色・灰色・赤色の毛・白髪には効果を発揮しません	
使用頻度が低すぎる	本説明書に沿った頻度で使用してください	
照射への反応が遅い体質である	体質には個人差がございます。お肌の状態をみて使用期間を延ばしてください。	
機器の使用時、湿気や熱が発生	正常な現象	/
ワキモードランプが点滅している	機器の温度が上がっている	機器を風通しの良い場所に置き、冷却をお待ちください
ワイヤレスで照射出来なくなった	ワイヤレス時は連続運転10分で停止	継続してご利用の際は、再度電源を接続し、入れなおしてください ※充電切れの場合は再度充電が必要です

◆問題

問題	考えられる原因	解決方法
ワイヤレスで照射出来なくなった	ワイヤレス時は連続照射でご利用の際は、連続10回照射で連続自動照射をONにしてください	

問題が解決しない場合はお客様窓口にお問い合わせください。修理の際は購入時のレシートと保証書が必要となります。この取扱説明書とともに大切に保管してください。

◆特別説明

JOVSは取扱説明書の改訂及び解釈に対して全ての責任を負い、その内容においてできる限り正確性を確保するよう努めます。本取扱説明書の内容は慎重な検討を経て作成しておりますが、方が一印刷漏れや誤記等がございましたら、法律の許容する範囲内で弊社が最終的な解釈権を有します。同時に弊社は製品及び取扱説明書において、修正や改訂の権利を有します。製品の構造は予告なく変更されることがあります。本取扱説明書に掲載された図は概略となっており、参考用です。図と実物が一致しない場合、製品実物に準じます。

JOVS Mini

取扱説明書